

## Tikkunäytteen ottaminen klamydia- ja tippuritutkimusta varten (naiset)

1738 -CtGcNhO

### Huom!

Ensisijaisesti paras ja luotettavin näytelaatu saadaan terveydenhoitohenkilökunnan ottamana. Tutkimusten mukaan naisilla klamydian ja tippurin diagnostiikkaan suositeltava näyte on emättimestä pumpulipäisellä näytteenottotikulla otettu tikkunäyte. Tikkunäytteiden lisäksi käytetään ensivirtsanäytettä.

### Tutkimukseen valmistautuminen

Vältä ottamasta näytettä runsaan kuukautisvuodon aikana. Mikäli mahdollista, 48 tuntia ennen näytteenottoa tulisi välttää tamponin, paikallisten lääkkeiden ja liukasteiden käyttöä sekä yhdyntää. Alapesua ei tehdä ennen näytteenottoa.

### Näytteenottotarvikkeet

- Erikseen pakattu pumpulipäinen näytteenottotikku (Valmistaja: Copan)
- Punakorkkinen näyteputki (Valmistaja: Copan)

On tärkeää, että liimaat näyteputken kylkeen erillisen tarran, johon olet kirjoittanut omat henkilötietosi. Tarran saat hoitoyksiköstä / laboratorion näytteenottovälineiden mukana.

### Näyteputken puskuriliuos

Näyteputken liuos sisältää viruksia stabiloivia proteiineja, bakteerien ja sienten ylikasvua estäviä antibioottisia ja antimykoottisia aineita sekä neutraalin pH:n ylläpitävää puskuriliuosta.

- Jos ainetta joutuu iholle, huuhto/suihkuta vedellä. Ihoärsytyksessä hakeuduttava lääkärin hoitoon.
- Jos ainetta joutuu silmään, huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
- Jos ainetta on nieltä, huuhtelee suu vedellä. Ota yhteys lääkäriin.


Mikäli altistumisen jälkeen kehittyä oireita, hakeudu lääkäriin. Tarvittaessa ota yhteys myrkytystietokeskukseen 09 471 977

## Näytteenotto

- Pese kädet vedellä ja saippualla.
- Ota pumpulipäinen näytteenottotikku pois pakkauksesta, älä koske tikun pehmeään päähän tai laske tikkua millekään alustalle. Jos näin kuitenkin tapahtuu, pyydä uusi näytteenottoasetti laboratorioista tai hoitoyksiköstänne.




- Levitä toisella kädellä varovasti häpyhuulia ja työnnä näytteenottotikku emättimeen noin 5 cm syvyyteen (ei liian syväälle). Osoita tikulla alaselkäsi kohti. Rentouta lihakset.

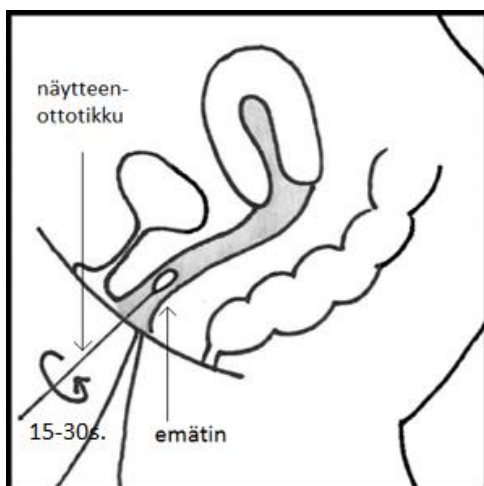

- Jos tikku ei liu'u helposti, pyöritä tikkua samalla kun työnnät sitä eteenpäin.
- Jos tikku ei vielääkään liu'u helposti, älä jatka näytteenottoa, vaan ota yhteys hoitoyksikköosi.
- Jos tikku liukuu helposti 5 cm syvyyteen, varmista, että se koskettaa emättimen seinämää.
- Pyörittele tikkua 15-30 sekunnin ajan emättimen seinämiä vasten.
- Ota tikku pois emättimestä, varo koskettamasta ihoa emättimen ulkopuolella.

- Laita näytetikku nestettä sisältävään puskuriliuosputkeen. Katkaise näytetikku niin, että se mahtuu puskuriputken sisälle. Sulje näyteputki huolellisesti korkilla.

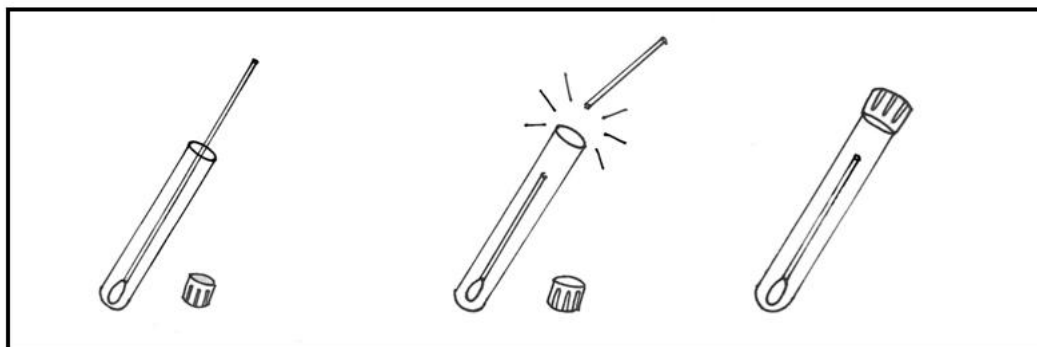

### Näytteenoton jälkeen

Kirjoita selkeällä käsialalla nimesi, henkilötunnuksesi ja näytteenottopäivämäärä samaasi tarraan ja liimaa tarra näyteputken kylkeen.

Toimita näyte laboratorioon tutkittavaksi samana päivänä, kun otat näytteen. Ennen toimitusta näyte voidaan säilyttää näyteputkessa huoneenlämmössä.

**Mikäli Teillä on kysyttävää, saatte lisätietoja laboratoriosta tai hoitoyksiköstänne.**