

Ohje ulostenäytteen antamiseen bakteeri- ja virustutkimuksia varten

8633 F-BaktNhO, 3584 F-BaktVi3, 2608 F-SalmVi, 6141 F-CldTNhO, 8826 F-VirNhO, 4940 F-NoroNhO, 8018 F-AdRoAg

Näytteenottotarvikkeet


Puhdas kertakäyttöinen astia (esim. kertakäyttölautanen), jokaiselle tutkimukselle oma FecalSwab-kuljetusputki, jokaiselle FecalSwab-kuljetusputkelle oma suljettava muovipussi (Minigrip tai vastaava), nimitarroja

Ulostenäytteen ottaminen


1. Ulostakaa puhtaaseen kertakäyttöiseen astiaan. Ulosteeseen ei saisi sekoittua virtsaa.




2. Avatkaa näyteputken kuljetuspussi ja siirtäkää näyteputki pois pussista. Avatkaa näyteputken korkki valmiiksi varoen nesteen kaatumista.

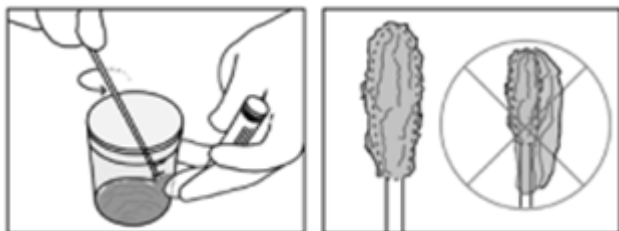


3. Kastakaa näytetikun harjapäätä ulosteessa siten, että näytettä tarttuu tasaisesti näytteenottoharjaksiin (ei liikaa). Mikäli ulosteessa on verisiä ja/tai limaisia kohtia, tulee näyte ottaa ensisijaisesti niistä.

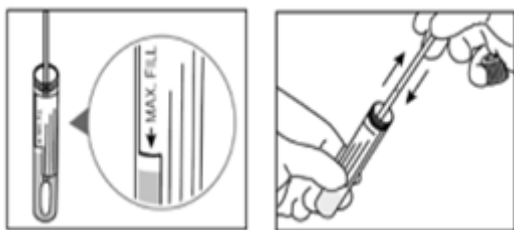

4. Siirtäkää näytetikku näyteputkeen. Näytettä ei saa olla niin paljon, että putkessa olevan nesteen pinta ylittää kuljetusputken kyljessä näkyvän MAX FILL – tason. Sekoittakaa näytettä varovasti tikulla niin, että uloste on tasaisesti levinnyt putkessa olevaan nesteeseen.

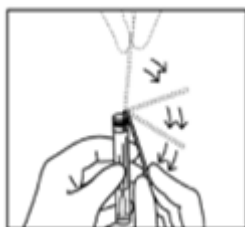

5. Katkaiskaa näytetikun varsi ohennetusta katkaisukohdasta putken seinämää vasten taittaen. Näytetikun kärkiosa jää näyteputken sisälle.

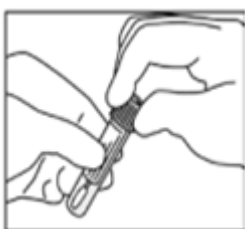

6. Sulkekaa näyteputken korkki huolellisesti kiertämällä. Varmistakaa, että korkki on tiukasti kiinni.

7. Mikäli teille on annettu useampi FecalSwab-kuljetusputki, niin ottakaa näyte jokaiseen putkeen ylläohjeistetulla tavalla. **Lopuksi peskää kädet.**

