

Urinprovtagning för klamydia- och gonorréundersökning

4816 U-CtGcNhO

Förberedelser inför undersökningen

Låt bli att urinera minst en timme innan provtagningen.

Tillbehör för provtagningen

Ett urinuppsamlingskärl av plast och provtagningspaket (BD MAX™ UVE Specimen Collection Kit, som innehåller provrör med buffertlösning och skruvkork, engångspipett av plast och provtagningssticka). Tillbehören för provtagningen får ni från laboratoriet eller er vårdenhet.


Provrörets buffertlösning

Buffertlösningen innehåller kaliumfosfat, EDTA, Tween®20 och Proclin.

Provtagningen

Tvätta inte underlivet innan provtagningen.

Urinera i uppsamlingskärlet 20-60ml. Det är viktigt att få med även de första dropparna av urinet. Resten kan urineras ner i toalettstolen. Överför, med hjälp av pipetten, 1ml (pipetten har en skala, 1ml är andra strecket nerifrån) urin från uppsamlingskärlet till provröret med buffertlösning. Skruva på korken till provröret ordentligt. Vänd provröret några gången, för att blanda urinet med buffertlösningen.

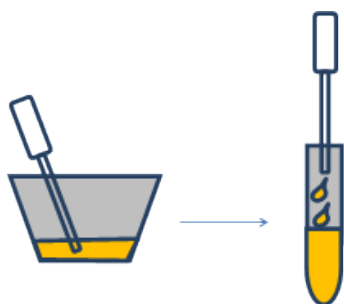

Efter provtagningen

Töm uppsamlingskärlet i toalettstolen och släng det tomma kärlet i skräpkorgen. Också engångspipetten, samt den oanvända provtagningsstickan, kan slängas i skräpkorgen.

Skriv ert namn, personbeteckning och datumet för provtagningen direkt på provröret.

Provet håller sig i buffertlösningen 5 dygn i rumstemperatur. Lämna dock vänligen provet till laboratoriet för undersökning under samma dag.