

## Urinprovtagning för graviditetstest

### 2124 U -hCG-O

#### Allmänt

Moderkakan av en gravid kvinna producerar hormonet hCG (humant koriongonadotropin) som utsöndras via serumet i urinen. Graviditeten kan konstateras genom att spåra den ökade hCG-nivån i urinen.

#### Hur ska man förbereda sig inför undersökning

Det tillförlitligaste provet får man från morgonurin. Ni kan äta och dricka normalt, om inga andra anvisningar getts er. Ni ska ändå undvika att dricka mycket, så att urinprovet inte späder ut och något felaktigt negativt resultat förekommer.

#### Provtagningsmateriel

En provtagningsburk med lock, ett provtagningsrör samt en namnetikett. Ni ska använda endast sådana provtagningsmedel som Ni fått från laboratoriet eller vårdenheten.

#### Provtagning

Att tvätta underlivet före provtagningen är inte nödvändigt. Öppna locket på provtagningsburken. Samla upp urinen i provtagningsburken och fyll den med cirka 2/3 av dess volym. Resten av urinen kan Ni låta rinna ner i toalettstolen. Stäng locket på provtagningsburken.

#### Överföring av provet till provtagningsröret

Överför urinen till provtagningsröret genast efter att provet tagits på följande sätt:

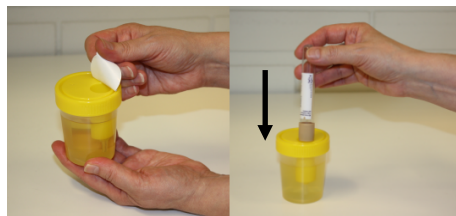


Bild 1

Bild 2

1. Ställ provtagningsburken på bordet. Avlägsna etiketten på locket. Rör inte provtagningsnålen. **(Bild 1)**
2. Öppna inte korken på provtagningsröret. Röret fylls inte om korken öppnas.
3. Tryck provtagningsröret med korken före mot nålpetsen ända ner, så att urinen strömmar in i röret. Håll röret på plats tills vätskan i röret inte längre stiger. **(Bild 2)**
4. Ta bort provtagningsröret från nålen genom att försiktigt dra det uppåt.
5. Provtagningsburken kan kastas i soporna (blandavfall).
6. Om Ni inte lyckas fylla provtagningsröret på det sätt som beskrivits ovan, ska Ni öppna locket på provtagningsburken samt korken på provtagningsröret och hålla urinen ur burken ner i provtagningsröret. Efter påfyllningen stäng korken på provtagningsröret ordentligt.

#### Efter att provet tagits

Skriv ert namn, er personbeteckning samt provtagningsdatum och klockslag på namnetiketten och fäst den på provtagningsröret. Lämna in provtagningsröret så snabbt som möjligt till laboratoriet.

Provet kan förvaras i kylskåp under två (2) dygn, vid behov.

#### Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.