

Tikkunäytteen ottaminen klamydia- ja tippuritutkimusta varten

1738 -CtGcNhO

Huom!

Ensisijaisesti paras ja luotettavin näytelaatu saadaan terveydenhoitohenkilökunnan ottamana. Tutkimusten mukaan naisilla klamydian ja tippurin diagnostiikkaan suositeltava näyte on emättimestä pumpulipäisellä näytteenottotikulla otettu tikkunäyte. Tikkunäytteiden lisäksi käytetään ensivirtsanäytettä. Miehillä testin herkkyys ensivirtsanäytteestä ja tikkunäytteestä virtsaputken limakalvolta on yhtä hyvä, joten suositeltu näyte CtGcNhO-tutkimukseen on ensivirtsanäyte.

Tutkimukseen valmistautuminen

Naiset: Vältä ottamasta näytettä runsaan kuukautisvuodon aikana. Mikäli mahdollista, 48 tuntia ennen näytteenottoa tulisi välttää tamponin, paikallisten lääkkeiden ja liukasteiden käyttöä sekä yhdyntää. Alapesua ei tehdä ennen näytteenottoa.

Miehet: Mikäli mahdollista, 48 tuntia ennen näytteenottoa tulisi välttää paikallisten lääkkeiden ja liukasteiden käyttöä sekä yhdyntää. Alapesua ei tehdä ennen näytteenottoa.

Näytteenottotarvikkeet

- Erikseen pakattu pumpulipäinen näytteenottotikku (Valmistaja: Copan)
- Punakorkkinen näyteputki (Valmistaja: Copan)

On tärkeää, että liimaat näyteputken kylkeen erillisen tarran, johon olet kirjoittanut omat henkilötietosi. Tarran saat hoitoyksiköstä / laboratoriosta näytteenottovälineiden mukana.

Näyteputken puskuriliuos

Näyteputken liuos sisältää viruksia stabiloivia proteiineja, bakteerien ja sienten ylikasvua estäviä antibioottisia ja antimykoottisia aineita sekä neutraalin pH:n ylläpitävää puskuriliuosta.

- Jos ainetta joutuu iholle, huuhto/suihkuta vedellä. Ihoärsytyksessä hakeuduttava lääkärin hoitoon.
- Jos ainetta joutuu silmään, huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
- Jos ainetta on nieltä, huuhtelee suu vedellä. Ota yhteys lääkäriin.


Mikäli altistumisen jälkeen kehittyä oireita, hakeudu lääkäriin. Tarvittaessa ota yhteys myrkytystietokeskukseen 09 471 977

Näytteenotto

- Pese kädet vedellä ja saippualla.
- Ota pumpulipäinen näytteenottotikku pois pakkauksesta, älä koske tikun pehmeään päähän tai laske tikkua millekään alustalle. Jos näin kuitenkin tapahtuu, pyydä uusi näytteenotto-
setti laboratoriosta tai hoitoyksiköstänne.




- Levitä toisella kädellä varovasti häpyhuulia ja työnnä näytteenottotikku emättimeen noin 5 cm syvyyteen (ei liian syvälle). Osoita tikulla alaselkäsi kohti. Rentouta lihakset.

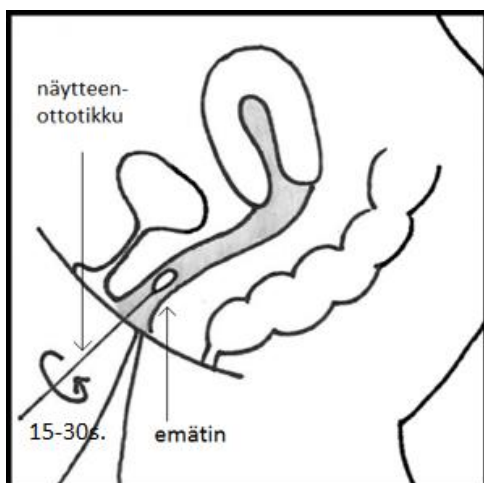

- Jos tikku ei liu'u helposti, pyöritä tikkua samalla kun työnnät sitä eteenpäin.
- Jos tikku ei vielääkään liu'u helposti, älä jatka näytteenottoa, vaan ota yhteys hoitoyksikköosi.
- Jos tikku liikuu helposti 5 cm syvyyteen, varmista, että se koskettaa emättimen seinämää.
- Pyörittele tikkua 15-30 sekunnin ajan emättimen seinämiä vasten.
- Ota tikku pois emättimestä, varo koskettamasta ihoa emättimen ulkopuolella.
- Tarvittaessa otettava rectumnäyte (miehet ja naiset): Näyte otetaan uudella puhtaalla näytteenottotikulla. Näytteenottotikku työnnetään peräaukkoon noin 3-5 cm syvyyteen. Tikkua pyöritellään peräsuolen limakalvoja vasten noin 10 sekunnin ajan, välttäen ulostetta.

- Laita näytetikku nestettä sisältävään puskuriliuosputkeen. Katkaise näytetikku niin, että se mahtuu puskuriputken sisälle. Sulje näyteputki huolellisesti korkilla.

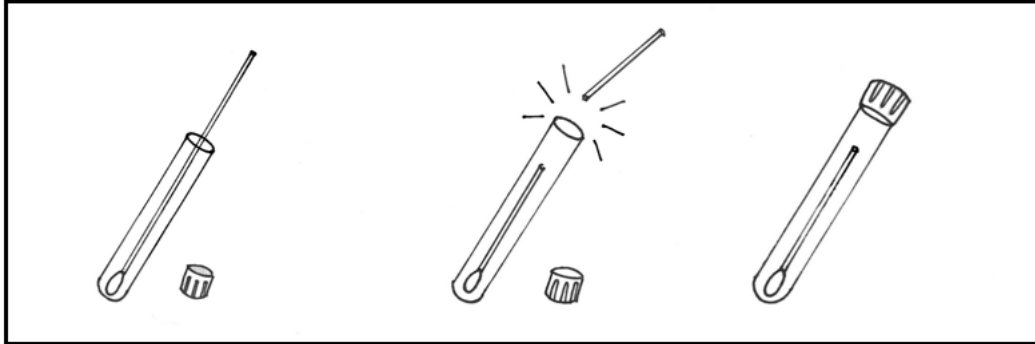

Näytteenoton jälkeen

Kirjoita selkeällä käsialalla nimesi, henkilötunnuksesi ja näytteenottopäivämäärä samaasi tarraan ja liimaa tarra näyteputken kylkeen.

Toimita näyte laboratorioon tutkittavaksi samana päivänä, kun otat näytteen. Ennen toimitusta näyte voidaan säilyttää näyteputkessa huoneenlämmössä.

Mikäli Teillä on kysyttävää, saatte lisätietoja laboratoriosta tai hoitoyksiköstänne.