

B-streptokokkiviljely ja -NhO näytteenotto

Tutkimuspyyntö	TutkimusNro	Tutkimus
FI-StrBVi	1729	Neuvoloissa tapahtuva B-streptokokkiseulonta
FI-StrBNhO	11530	Synnytyssairaaoloissa nopeaan diagnostiikkaan tarkoitettu geenimonistukseen perustuva tutkimus. Tilattavissa paikallisten käytäntöjen mukaan.

1. Näytteenotto

1.1 Viljelynäyte (FI-StrBVi)

Näytteenottovälineet


- Vanutikku ja bakteerinäytteen geelikuljetusputki.

Huomioitavaa

- Näytteenotossa on tärkeää, että näyte otetaan sekä emättimestä että peräaukosta. Oikea näytteenottotekniikka vaikuttaa testien herkkyyteen löytää B-streptokokkikantajuus.
- Lähetä putki laboratorioon samana päivänä. Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä ja enintään 3 vrk jääkaappilämpötilassa.

Näytteenotto-ohje:

- Ota näyte ennen sisätutkimusta.
- Pyöritä näytetikku ensin vaginassa. Siirrä sama tikku peräaukkoon ja pyöritä tikkua siellä n. 2,5 cm syvyydessä.
- Laita tikku geeliputkeen.

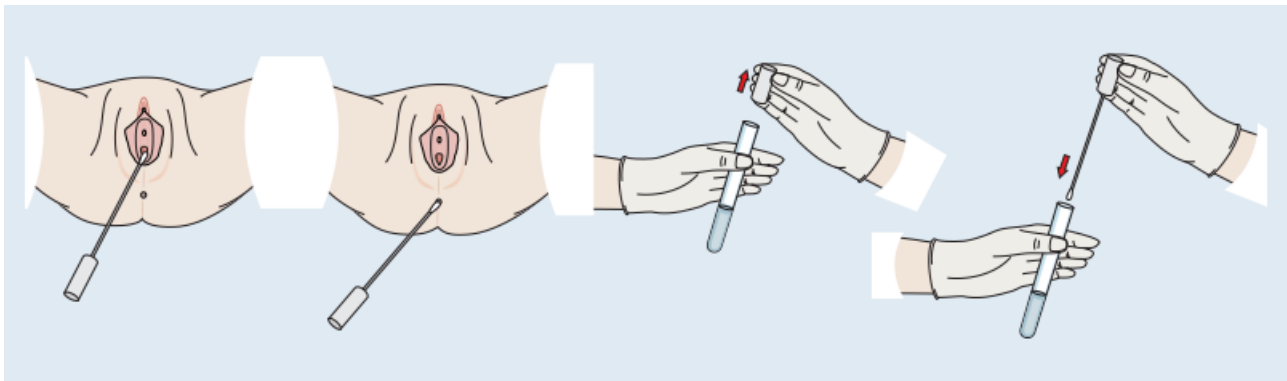

1.2. NhO-näyte (FI-StrBNhO)


Näytteenottovälineet


- FI-StrBNhO: COPAN Transssystem sterile transport swab – kaksoistikku. Säilytys huoneenlämmössä.


Huomioitavaa


- Näytteenotossa on tärkeää, että näyte otetaan sekä emättimestä että peräaukosta. Oikea näytteenottotekniikka vaikuttaa testien herkkyyteen löytää B-streptokokkikantajuus.
- Ota näyte ennen sisätutkimusta.
- Lähetä putki mahdollisimman pian laboratorioon. Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä.


Näytteenotto-ohje:

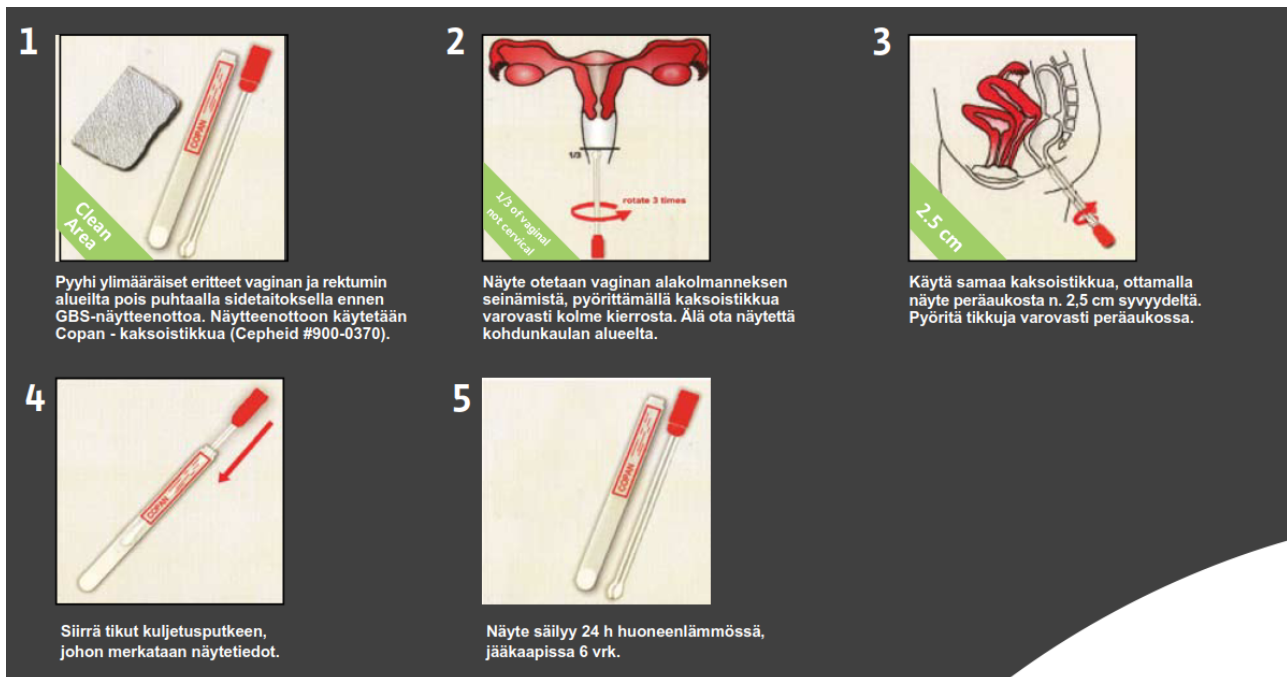


1  Pyyhi ylimääräiset eritteet vaginan ja rektumin alueilta pois puhtaalla sidetaikoksella ennen GBS-näytteenottoa. Näytteenottoon käytetään Copan - kaksoistikkua (Cepheid #900-0370).

2  Näyte otetaan vaginan alakolmanneksen seinästä, pyörittämällä kaksoistikkua varovasti kolme kierrosta. Älä ota näytettä kohdunkaulan alueelta.

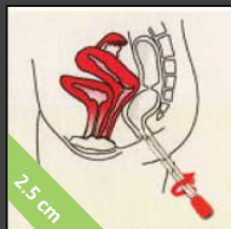3  Käytä samaa kaksoistikkua, ottamalla näyte peräaukosta n. 2,5 cm syvyydeltä. Pyöritä tikkuja varovasti peräaukossa.

4  Siirrä tikut kuljetusputkeen, johon merkataan näytetiedot.

5  Näyte säilyy 24 h huoneenlämmössä, jääkaapissa 6 vrk.