

Ulostenäytteenotto bakteeri- ja virustutkimuksia sekä parasiittien nukleiinihapon osoitusta varten

8633 F-BaktNhO, 3584 F-BaktVi3, 2608 F-SalmVi, 6141 F-CldTNhO, 8826 F-VirNhO, 4940 F-NoroNhO, 8018 F-AdRoAg, 6375 F-ParaNhO, 11670 F-DifrNhO

Näytteenottotarvikkeet


Puhdas kertakäyttöinen astia (esim. kertakäyttölautanen), jokaiselle tutkimukselle oma FecalSwab-kuljetusputki, jokaiselle FecalSwab-kuljetusputkelle oma suljettava muovipussi (Minigrip tai vastaava), nimitarroja

Ulostenäytteen ottaminen


1. Ulostakaa puhtaaseen kertakäyttöiseen astiaan. Ulosteeseen ei saisi sekoittua virtsaa.




2. Avatkaa näyteputken kuljetuspussi ja siirtäkää näyteputki pois pussista. Avatkaa näyteputken korkki valmiiksi varoen nesteen kaatumista.

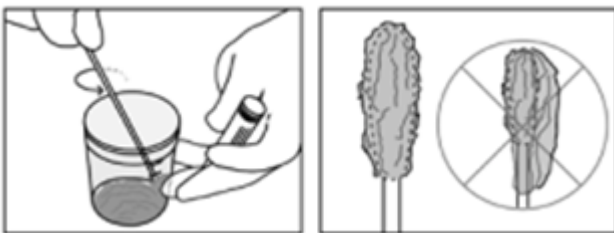


3. Kastakaa näytetikun harjapäätä ulosteessa siten, että näytettä tarttuu tasaisesti näytteenottoharjaksiin (ei liikaa). Mikäli ulosteessa on verisiä ja/tai limaisia kohtia, tulee näyte ottaa ensisijaisesti niistä.

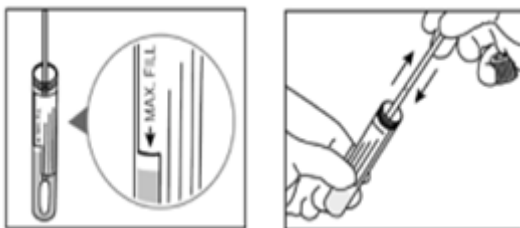

4. Siirtäkää näytetikku näyteputkeen. Näytettä **ei** saa olla niin paljon, että putkessa olevan nesteen pinta ylittää kuljetusputken kyljessä näkyvän MAX FILL – tason. Sekoittakaa näytettä varovasti tikulla niin, että uloste on tasaisesti levinnyt putkessa olevaan nesteeseen.

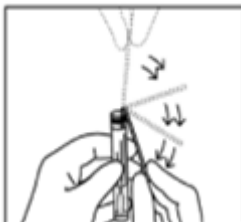

5. Katkaiskaa näytetikun varsi ohennetusta katkaisukohdasta putken seinämää vasten taittaen. Näytetikun kärkiosa jää näyteputken sisälle.

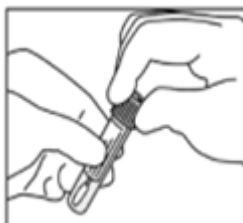

6. Sulkekaa näyteputken korkki huolellisesti kiertämällä. Varmistakaa, että korkki on tiukasti kiinni.

7. Mikäli teille on annettu useampi FecalSwab-kuljetusputki, niin ottakaa näyte jokaiseen putkeen ylläohjeistetulla tavalla. **Lopuksi peskää kädet.**

Näytteenoton jälkeen

Täyttäkää nimitarroihin nimenne, henkilötunnuksenne, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika ja liimatkää tarrat kuljetusputkiin. Pakatkaa jokainen FecalSwab-kuljetusputki omaan erilliseen suljettavaan muovipussiin.

Näytteen säilytys ja palauttaminen

Säilyttäkää näyteputki jääkaappilämpötilassa. Toimittakaa näyte laboratorioon mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana päivänä näytteenotosta.

Mikäli Teillä on kysyttävää, saatte lisätietoja hoitoyksiköstänne