

Avföringsprovtagning för bakterie- och virusundersökningar och nukleinsyradetektion av parasiter

8633 F-BaktNhO, 3584 F-BaktVi3, 2608 F-SalmVi, 6141 F-CldTNhO, 8826 F-VirNhO, 4940 F-NoroNhO, 8018 F-AdRoAg, 6375 F-ParaNhO, 11670 F-DifrNhO

Provtagningsmaterial

Rent engångskärl (t.ex. engångstallrik), egen provrörsförpackning (innehåller FecalSwab transportrör med buffertlösning och skruvkork, samt en provtagningssticka) för varje undersökning, förslutbar plastpåse (Minigrip eller motsvarande) för varje enskilt FecalSwab-rör, etiketter med personuppgifter

Provtagning


1. Ta avföringsprovet i ett rent engångskärl. Det får inte blandas urin i avföringen.




2. Öppna FecalSwab provrörsförpackningen och avlägsna provröret ur förpackningen. Öppna korken försiktigt så att inte vätskan hälls ut.



3. Doppa provtagningsstickans borstdel i avföringen så att avföringen fastnar jämnt på borstdelen (inte för mycket). Ifall slemmig/blodigt innehåll förekommer, skall provet i första hand tas därifrån.

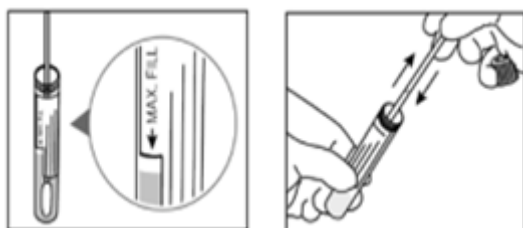

4. Överför provtagningsstickan till transportröret. Det får **inte** finnas så mycket avföring i provet att transportrörets vätskeyta överskrider MAX FILL-markeringen på provrörets sida. Blanda försiktigt om provet med stickan så att avföringen blandas jämt ut i vätskan.

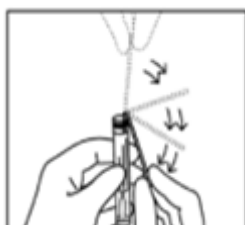

5. Bryt provtagningsstickan genom att böja den vid brytmarkeringen mot provrörets kant. Stickans spetsdel blir kvar i provröret.



6. Stäng transportrörets kork väl genom att skruva på korken. Försäkra er om att korken är ordentligt fast.

7. Ifall ni har givits flera FecalSwab- transportrör, lägg avföring i varje rör enligt ovanstående instruktioner. **Till slut, tvätta händerna.**

Efter provtagningen

Fyll namn, personbeteckning, datum och klockslag för provtagningen på etiketterna och limma dem på transportrören. Lägg varje transportrör i en egen förslutbar plastpåse, och slut påsen väl.

Förvaring och returnering av provet

Förvara provet i kylskåpstemperatur. Lämna provet till laboratoriet för undersökning under samma dag, dock **senast dagen efter provtagningen**.

Ifall Ni har frågor, vänligen kontakta er vårdande enhet.